

cervistrong

Collare cervicale con rinforzo

REF. 20304

Indicazioni

- Distorsioni della colonna cervicale lievi o moderate (colpo di frusta)
- Crisi vertiginose di origine cervicale
- Artrosi cervicale
- Moderate discopatie con associata cervico-brachialgia



RADIO
LUCENT



ANATOMICAL
FIT

Codice	REF. 20304			
Taglia	S	M	L	XL
Circonferenza collo cm	30/35	36/41	42/47	48/53
Altezza cm	6-8-10-12	6-8-10-12	6-8-10-12	6-8-10-12
Colore	grigio			



cervistrong

Collare
cervicale con
rinforzo



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Siedziba w Polsce: Orthoservice Polska Sp. z o. o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHO SERVICE
RO+TEN**

Take care feel better



**ORTHO SERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Il collare cervicale innovativo

Quello cervicale è il tratto meno protetto del rachide, per questo può incorrere in **distorsioni** (stiramento delle fasce muscolari e dei tendini) o in **affezioni osteoarticolari** (artrosi e discopatie) che possono risultare particolarmente invalidanti.



Limitare il più possibile i movimenti è il trattamento d'elezione. Fino ad oggi si doveva scegliere tra un collare rigido, efficace ma scomodo e un collare morbido, confortevole ma con meno tenuta. **Cervistrong**, risultato di una progettazione innovativa, **unisce insieme un'efficacia e un comfort mai visti prima.**

Come è fatto Cervistrong

1 ANIMA RIGIDA

Una **speciale anima rigida in polietilene**, con bordi rinforzati in materiale polimerico, immobilizza il rachide cervicale coadiuvando la sua funzione di sostegno. Non viene percepita sulla pelle.


2 STRUTTURA IN GOMMAPIUMA

La struttura è in morbida gommapiuma. Già sagomata, **si adatta all'anatomia individuale**, seguendo le curvature di mandibola e nuca.

3 RIVESTIMENTO IN MAGLINA

È ricoperto da un **morbido tessuto in maglina** che lo rende piacevole al contatto con la pelle. Si chiude posteriormente a Velcro®, per un'applicazione facile e veloce.

Velocizza
la guarigione e
allevia il dolore

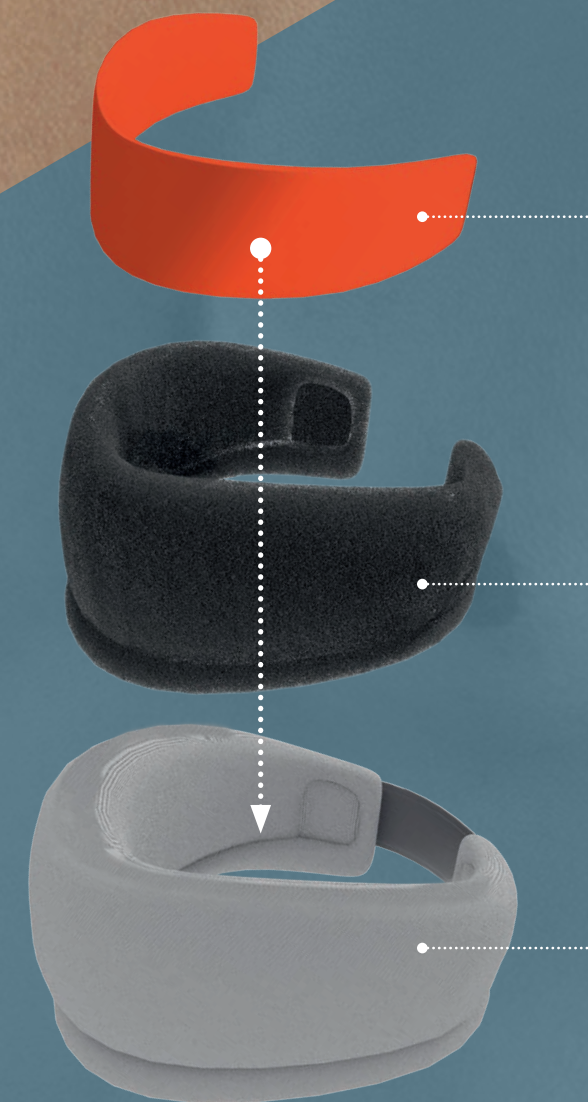

1
Robusta anima in polietilene con bordi in materiale polimerico.

2
Struttura in morbida gommapiuma, anatomicamente sagomata.

3
Esterno in maglina e chiusura posteriore a Velcro®.