

Sempre a supporto del ginocchio instabile

Progettata per l'instabilità o le rotture dei legamenti, rappresenta un tutore d'elezione in **qualsiasi situazione di instabilità** del ginocchio, sia traumatiche che degenerative. È consigliata in fase **pre/post operatoria**, per il trattamento conservativo o come **protezione preventiva**.

Calzata anteriore

La ginocchiera Pluspoint Fast si applica anteriormente, senza necessità di infilare il piede. Questa sua caratteristica la rende particolarmente **pratica e maneggevole**.

CINTURINI FACILISSIMI DA CHIUDERE

I cinturini non devono essere sfilati e reinfilati ogni volta, ma si chiudono tramite **piccole leve**, mantenendo intatta la regolazione effettuata alla prima applicazione.



EFFICACIA DEI 4 PUNTI DI SPINTA

Il sistema di funzionamento a 4 punti di spinta garantisce un'efficace azione di sostegno, stabilizzando in modo ottimale l'articolazione del ginocchio.

9 DCDP001571TA01.0322

pluspoint FAST

Ortesi funzionale per ginocchio

REF. 22040

Indicazioni

- Instabilità e rotture L.C.A. – L.C.P. – L.C.M. – L.C.L. o combinate
- Instabilità del ginocchio complesse, traumatiche o degenerative
- Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o conservativo delle suddette lesioni
- Protezione dei legamenti durante attività sportiva



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE PATENT EP3492050 PATENT US10548758 EASY ADJUSTING EASY FASTENING LOW PROFILE ANATOMICAL FIT CUSTOMIZABLE FIT

Codice	REF.22040				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Lunghezza cm	40	40	40	40	40
Colore	grigio scuro				

Indicare destro o sinistro



orthoservice.com



FSC C003468



UN EN ISO 14001:2015 UN EN ISO 9001:2015



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de
Siedziba w Polsce: Orthoservice Polska Sp. z o. o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl
Sede italiana: RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland

pluspoint FAST

Ortesi funzionale per ginocchio




ORTHOSERVICE RO+TEN
Take care feel better



ORTHOSERVICE RO+TEN
Take care feel better

Telaio anatomico sagomabile a calzata anteriore

Realizzato in una speciale lega di alluminio, è sagomabile, particolarmente sulla presa di coscia e tibia. La calzata anteriore facilita il paziente per un'applicazione rapida e intuitiva.

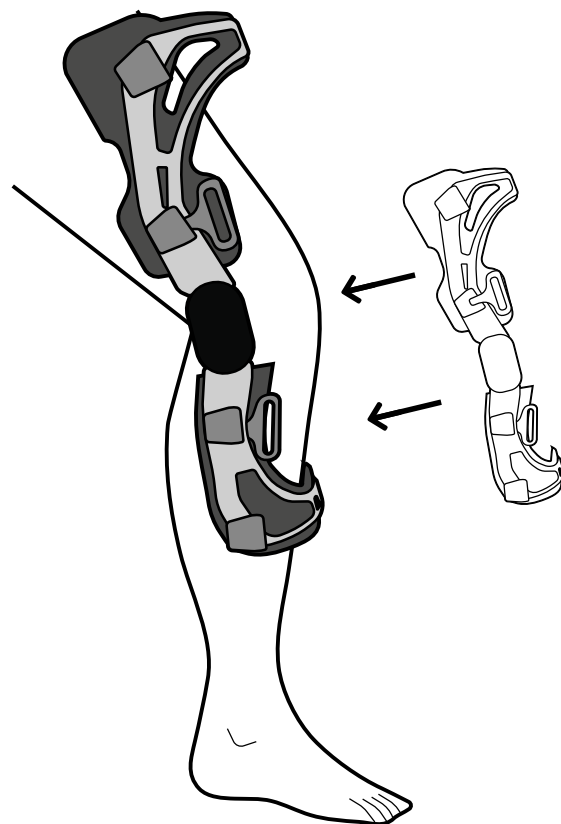

SISTEMA DI FIBBIE A LEVA

I cinturini non vanno infilati nelle fibbie ma si agganciano al telaio tramite speciali fibbie a leva, dotate anche di bottone di sicurezza.



CINTURINI NUMERATI E IMBOTTITI

I cinturini sono numerati per facilitare la corretta successione di chiusura. Internamente presentano imbottiture in MTP, senza cuciture, confortevoli sulla pelle.

CUSCINETTO CONDILOIDEO MEDIALE

Anatomicamente disegnato e premontato, conferisce maggiore stabilità.

IMBOTTITURA TIBIALE

La tibia si posiziona tra due extra spessori laterali, per migliorare il comfort e la stabilità del tutore.

SET DI IMBOTTITURE CONDILARI

In dotazione, un pratico set di imbottiture di diverso spessore, adatte a qualsiasi necessità.

SNODO CLICKCLACK

Regola la Flessione Estensione tramite cunei, senza necessità di alcun utensile (cacciavite o brugola). Policentrico e a bassissimo profilo, si apre, si regola, si richiude.

Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°

Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°

Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°.



IMBOTTITURE TERMOFORMATE

Internamente (a contatto pelle) sono rivestite da un tessuto anallergico e antiscivolo, esternamente presentano una texture dal moderno design. Fissate con bottoni automatici a basso profilo, si tolgono facilmente per la pulizia del tutore.



Mai vista
una ginocchiera così
facile da indossare